

beSimple Modulo custom data

Manuale configurazione v 1.0

Premessa.....	3
Modalità di accesso	3
Inserimento.....	4
Modifica	5
Cancellazione	5
Conclusioni.....	5

Premessa

Il presente manuale ha lo scopo di illustrare il modulo interno al sistema RIS per l'utilizzo dei custom data.

Modalità di accesso


Essendo il modulo delle statistiche interno al RIS, per l'accesso è necessario essere loggati all'interno del sistema. Il link da attivare si trova sotto il menù "Impostazioni" disponibile in alto al centro dello schermo.

Dopo aver cliccato sul pulsante "Gestione custom data", si arriva alla schermata che segue:

E' possibile notare quali siano i custom data già configurati sul sistema, eventualmente modificarne alcune caratteristiche, oppure crearene di nuovi.

Inserimento

Per creare un nuovo custom data è necessario cliccare sul pulsante “New Template”.
Apparirà la schermata che segue:

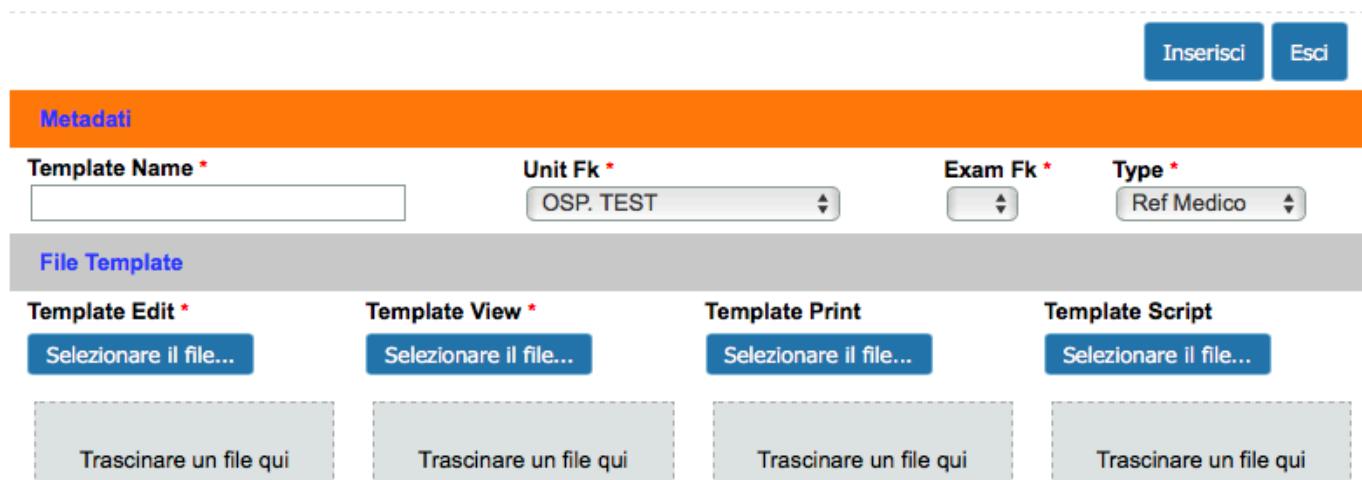

Inserisci

Esci

Metadati

Template Name *

Unit Fk *

Exam Fk *

Type *

OSP. TEST

Ref Medico

File Template

Template Edit *

Template View *

Template Print

Template Script

Selezionare il file...

Selezionare il file...

Selezionare il file...

Selezionare il file...

Trascinare un file qui

Trascinare un file qui

Trascinare un file qui

Trascinare un file qui

A questo punto bisogna compilare i campi relativi alle caratteristiche del custom data che andremo a creare.

Il campo “Template Name” indica il nome e sarà visibile a GUI come titolo.

Come secondo valore è necessario impostare il centro di costo per il quale sarà visibile il custom data. Il terzo campo deve contenere l'esame legato all'inserimento del template.

Come ultimo valore deve essere specificato il tipo di template che si intende inserire.

Ci sono tre tipologie di custom data che si possono utilizzare:

- quelli relativi al personale tecnico
- quelli relativi al personale medico (da inserire nei dettagli studio)
- quelli relativi al personale medico (da inserire nella console di refertazione)

A questo punto è necessario indicare al sistema i file contenenti il codice per la creazione e la visualizzazione del custom data.

Questi possono essere inseriti cliccando sul pulsante “Selezione il file...” oppure trascinandola all'interno dell'area che contiene la dicitura “Trascinare un file qui”.

Una volta compilati tutti i campi (quelli obbligatori sono contrassegnati dal simbolo *), basterà cliccare sul pulsante “Inserisci” per inserire il nostro custom data.

Modifica

Per modificare un custom data è necessario cliccare sul pulsante relativo al record da editare.

Pk	Template Name	EXAM	Attivo	Unit	Type	Download	delete	Modify
1	1TC Torace TSRM	TC LOMBO-SACRALE	Inactive	TERME SAN PETRONIOTSRM Execution				
2	Torace Ref	TC LOMBO-SACRALE	Inactive	TERME SAN PETRONIOMD Reporting				
3	3TC Contrasto TSRM	TC LOMBO-SACRALE (SENZA E CON CONTRASTO)	Inactive	TERME SAN PETRONIOTSRM Execution				
4	SIEMENS	TC LOMBO-SACRALE	Active	TERME SAN PETRONIOTSRM Execution				

Vai a Visualizza [1 a 4 di 4]

Per ogni custom data è possibile modificare i seguenti campi:

- il nome del template
- lo stato (attivo o non attivo)

Gli altri campi non sono modificabili.

Se dovesse essere necessario modificare uno degli altri campi, bisogna cancellare il template e crearne uno nuovo.

Cancellazione

Per cancellare un custom data è necessario cliccare sul simbolo corrispondente.

Conclusioni

E' possibile notare come nella schermata relativa ll'elenco dei custom data sia presente il seguente simbolo

Questo simbolo serve per scaricare in locale i file che servono alla creazione di un template.

Avendoli in locale, è possibile modificarli per caricarli su altri templates.

Facendo click su questo simbolo apparirà la seguente schermata:

be.Simple
RIS

Anagrafica Pazienti Agenda Lista Di Lavoro Area Clinica Gestione dose Impostazioni

Connected user: Cerri Simone
 Time: Mon Jan 22 2018 11:34:35 GMT+0100 (CET)
 My IP: 192.168.199.85

PRN TEST Variabili SQL Incl Chiudi Applicazione

New Template

Ricerca rapida

Pk	Template Name	EXAM	Attivo	Unit	Type	Download	delete	Modify
1	TC Torace TSRM	TC LOMBO-SACRALE	Inactive	TERME SAN PETRONIO TSRM Execution				
2	Torace Ref	TC LOMBO-SACRALE	Inactive	TERME SAN PETRONIO MD Reporting				
3	TC Contrasto TSRM	TC LOMBO-SACRALE (SENZA E CON CONTRASTO)	Inactive	TERME SAN PETRONIO TSRM Execution				
4	SIEMENS	TC LOMBO-SACRALE	Active	TERME SAN PETRONIO TSRM Execution				

Vai a 1 Visualizza 10

Chiudi Output

SCARICA ZIP

[1 a 4 di 4]

Basterà ora cliccare sulla scritta SCARICA ZIP per avere a disposizione in locale i quattro file che consentono la creazione di un template:

4_edit.html	oggi 11:36	5 KB	HTML
4_print.html	oggi 11:36	Zero byte	HTML
4_script.js	oggi 11:36	163 byte	TextWr.
4_view.html	oggi 11:36	1 KB	HTML