


PROCEDURA PER LA RICONCILIAZIONE DEGLI STUDI NON ASSOCIATI

1. Scopo del documento

Il documento descrive la procedura che permette all'utente di riconciliare gli studi presenti sul gateway centrale che non sono stati inviati automaticamente al PACS PLAZA.

2. Descrizione della procedura

L'accesso alla procedura avviene direttamente dal sistema RIS.
E' necessario posizionarsi sull'esame da riconciliare (foto sotto)

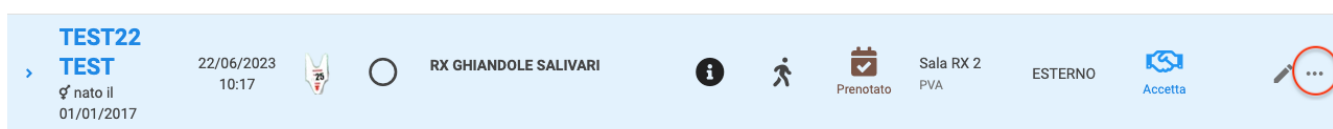

The screenshot shows a patient record for 'TEST22 TEST' with birth date '01/01/2017' and exam date '22/06/2023'. The exam is 'RX GHIANDOLE SALIVARI'. There are icons for 'Prenotato', 'Sala RX 2 PVA', 'ESTERNO', and 'Accetta'. A red circle highlights a menu icon (three dots) in the top right corner.

Cliccare sul pulsante "Funzioni avanzate".
Si aprirà la schermata riportata sotto:

FUNZIONI AVANZATE

Stampe disponibili

Nessun risultato

Modifica stato esame

Operazione non
permessa

Applicazioni esterne

Verifica Studio Dicom

IMPORTA Studio Dicom ESTERNO

Funzioni Custom

Cliccare sul pulsante “Verifica Studio Dicom”

Buongiorno simone.cerri
Benvenuto nella riconciliazione studi DICOM di VirtuHis nel dominio villaazzurra
v22.230317


Riconciliazione Studi DICOM



PAZIENTE : TEST22 TEST
CF : XXXYYY17S56A326L
DOB : 2017-01-01 00:00:00
SEX : O
SSN : 123456
ADDRESS : VIA CROIX-NOIRE 24 (11100)
CITY, STATE, ZIP_CODE : 7003

Ordine Nr. : 62 del 2023-06-22 10:17:02
REASONFORSTUDY :
TRANSACTION DATE :
RELEVANT CLINIC INFO :
VISIT NUMBER :

IDPROCEDURE	EXAM_DATE	IDEXAM	EXAM	CHECKED	IDROOM	ROOM	ACCESS_NUMBER	IDFILLER	EXAM_DATE_END	STUDY_INST_UID
66		105	RX GHIANDOLE SALIVARI	F	101	Sala RX 2	VA62	62		1.2.826.0.1.3680043.9.3677.500.18.4.62.6

STUDI DA RICONCILIARE

Ricerca rapida 

Colonne Ordinamento  Esporta  Ricerca

Nella schermata sopra sono riportati i dati relativi allo studio che vogliamo riconciliare.

Sotto, nella sezione “STUDI DA RICONCILIARE”, è riportato l’elenco degli studi presenti sul gateway centrale che sono in attesa di essere riconciliati.

A questo punto sarà sufficiente cliccare sul pulsante “ASSOCIA QUESTO” presente all’inizio del record dell’esame da riconciliare.

Buongiorno simone.cerri
Benvenuto nella riconciliazione studi DICOM di VirtuHis nel dominio villaazzurra
v22.230317


Riconciliazione Studi DICOM



PAZIENTE : TEST22 TEST
CF : XXXYYY17S56A326L
DOB : 2017-01-01 00:00:00
SEX : O
SSN : 123456
ADDRESS : VIA CROIX-NOIRE 24 (11100)
CITY, STATE, ZIP_CODE : 7003

Ordine Nr. : 62 del 2023-06-22 10:17:02
REASONFORSTUDY :
TRANSACTION DATE :
RELEVANT CLINIC INFO :
VISIT NUMBER :

IDPROCEDURE	EXAM_DATE	IDEXAM	EXAM	CHECKED	IDROOM	ROOM	ACCESS_NUMBER	IDFILLER	EXAM_DATE_END	STUDY_INST_UID
66		105	RX GHIANDOLE SALIVARI	F	101	Sala RX 2	VA62	62		1.2.826.0.1.3680043.9.3677.500.18.4.62.6

STUDI DA RICONCILIARE

Ricerca rapida 

Colonne Ordinamento  Esporta  Ricerca

		Study Date	Study Time	Study Description	Accession Number	Pat Name	Modality	Pat Id	Birth Date
...	ASSOCIA QUESTO	29/06/2023 00.00.00	29/06/2023 10.05.48	ND				A2023062900005	28/12/1980 00.00.00
...	ASSOCIA QUESTO	29/06/2023 00.00.00	29/06/2023 08.33.25	ND				A2023062900002	

Verificare se l’esame è stato modificato ed inviato correttamente al PACS PLAZA.